



NOTA INFORMATIVA

Denominazione: REFLEXX 77

Data: 17/03/2021 Rev: 07

FABBRICANTE

REFLEXX SpA
Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)
Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504
info@reflexx.com
www.reflexx.com



| Imballo | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Cod./Taglie | Confezione | Cartone |
| R77100F/S | 8032891633878 | 8032891638873 |
| R77100F/M | 8032891633892 | 8032891638897 |
| R77100F/L | 8032891633922 | 8032891638927 |
| R77100F/XL | 8032891633953 | 8032891638958 |
| R77100/XS | 8032891633465 | 8032891638460 |
| R77100/S | 8032891633472 | 8032891638477 |
| R77100/M | 8032891633489 | 8032891638484 |
| R77100/L | 8032891633496 | 8032891638491 |
| R77100/XL | 8032891633502 | 8032891638507 |
| R77/XS | 8032891633809 | 8032891638804 |
| R77/S | 8032891633823 | 8032891638828 |
| R77/M | 8032891633847 | 8032891638842 |
| R77/L | 8032891633861 | 8032891638866 |
| R77/XL | 8032891633885 | 8032891638880 |

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** nitrile ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** azzurro ■ **Finitura:** internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate ■ **Imballo:** 100 o 200 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI

Dispositivo Protezione Individuale cat III

0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)

Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009

*Dispositivo Medico

Reg UE 2017/745- EN 455 1,2,3 & 4

(CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE)

*Conforme alle norme ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea)



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

*Queste conformità non sono dichiarate sui prodotti venduti come linea food.


| DIMENSIONI | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Cod./Taglia | | Lungh. min(mm) | Largh. (±5 mm) | |
| / | R77100/ XS (6) | R77/ XS (6) | 240 | 75 |
| R77100F/S (7) | R77100/ S (7) | R77/ S (7) | 240 | 85 |
| R77100F/M (8) | R77100/ M (8) | R77/ M (8) | 240 | 95 |
| R77100F/L (9) | R77100/ L (9) | R77/ L (9) | 240 | 106 |
| R77100F/XL (10) | R77100/ XL(10) | R77/ XL(10) | 240 | 116 |

| | | |
|-------------|------------------|------|
| Spessore mm | Palmo (+/- 0.02) | 0.06 |
|-------------|------------------|------|

| | | |
|------------------|-------------------|-------|
| EN 455-2:2009/A1 | Carico di rottura | ≥ 6 N |
|------------------|-------------------|-------|

| | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| EN ISO 374-5:2016 | Protezione da microrganismi (batteri e funghi) | Protezione da virus ISO 16604:2004 |
| | superata | superata |

| EN ISO 374-1:2016 | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Composto chimico: | EN 16523-1:2015 TIPO C | | EN 374-4:2013 | |
| | COD | Livello prestazionale | Tempo di passaggio | % degradazione |
| Sodio idrossido 40% | K | 3 | >60' | 7,1% |

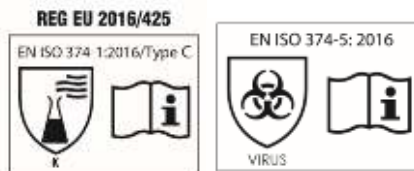

RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Codice sostanza chimica | | Protezione offerta |
| K Idrossido di sodio 40 % | CAS:1310-73-2 | Protezione da uso di basi inorganiche |

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com